



Interferências e Intercorrências Testes Rápidos.



O QUE É UMA INTERCORRÊNCIA DE TESTE RÁPIDO?

- ➔ É considerada intercorrência com testes rápidos qualquer observação de avaria no kit ou a apresentação de resultados falsos.




O QUE SERIA A APRESENTAÇÃO DE UM RESULTADO FALSO NO TESTE RÁPIDO?




- Quando a condição de saúde investigada não corresponde ao resultado do teste.
- Somente é possível concluir que um resultado de TR foi falso após a realização de testes complementares, investigação/controle qualidade;
- O primeiro passo é preencher o Formulário de Atendimento do Ministério da Saúde e verificar se o fluxograma do Manual de Sífilis foi realizado;





POSSÍVEIS CAUSAS DE OBTENÇÕES DE RESULTADOS FALSOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE TRABALHO.

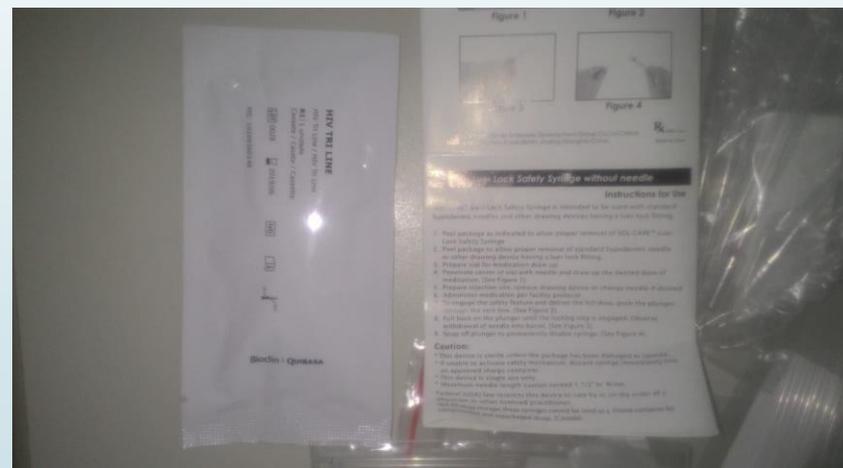

ERRO PRÉ ANALÍTICO- VOLUME AMOSTRA INADEQUADO.


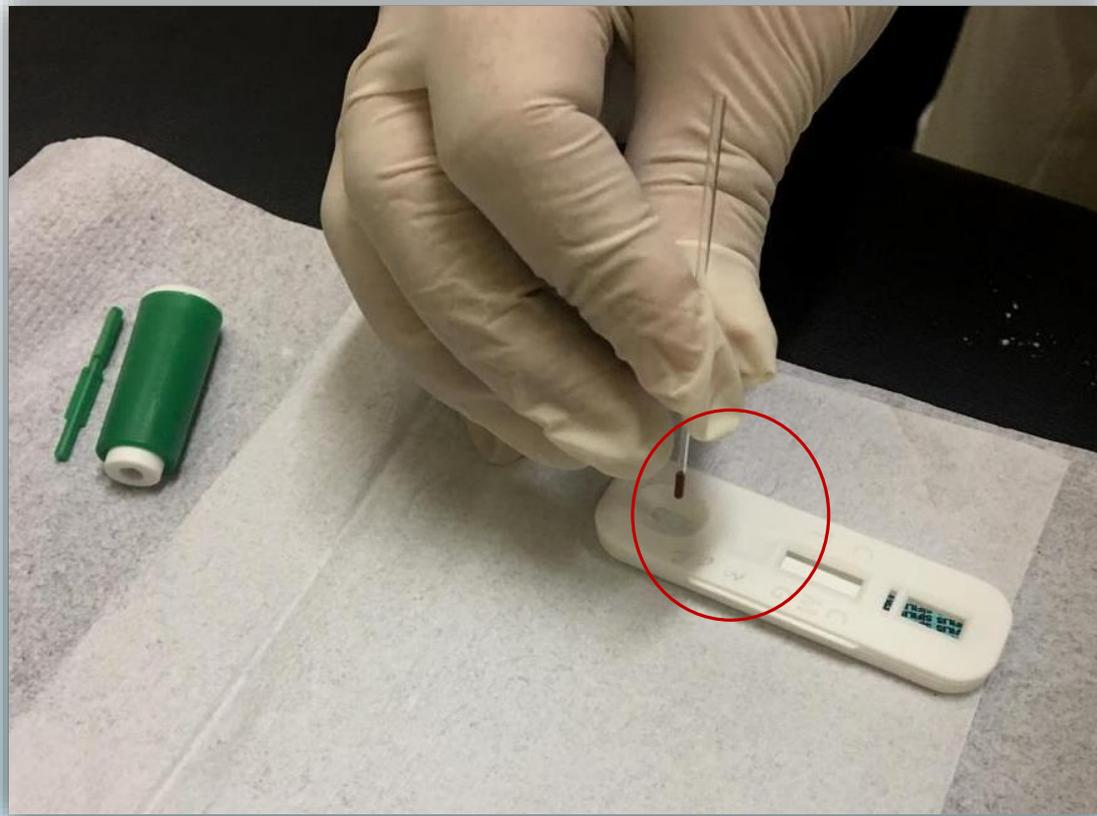


POSSÍVEIS CAUSAS DE OBTENÇÕES DE RESULTADOS FALSOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE TRABALHO.

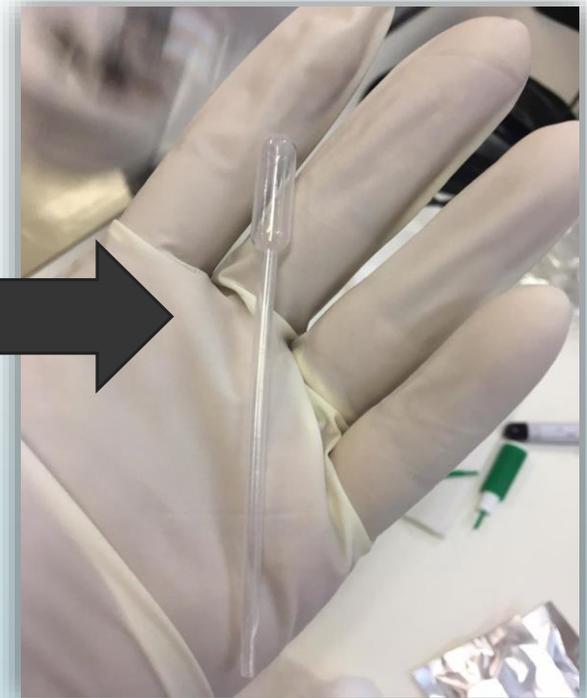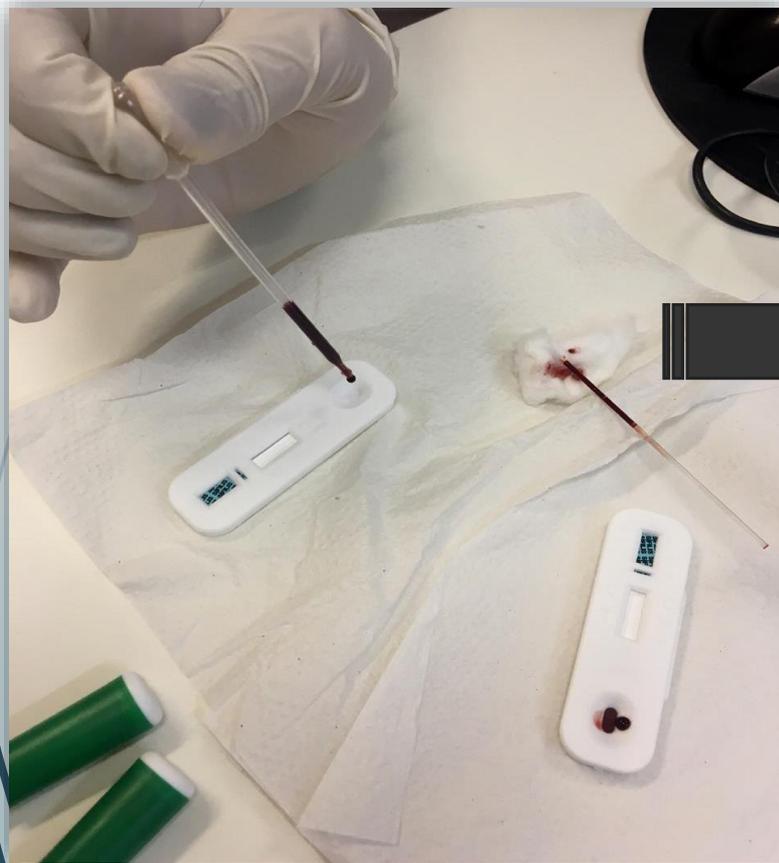

Pipeta de outro kit com volume diferente

IMUNO-RÁPIDO SÍFILIS WAMA

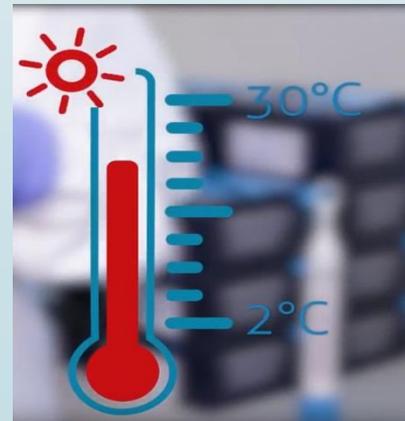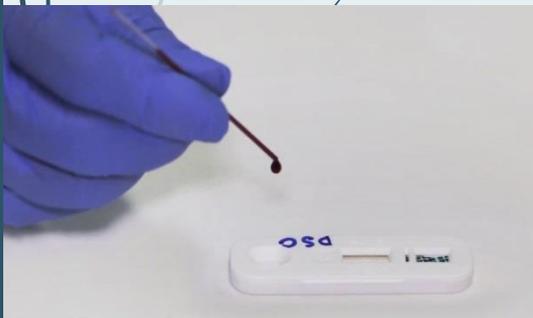

Instruções para execução do TESTE RÁPIDO DE SÍFILIS




Limpar com álcool o
dedo do paciente.




Furar o dedo do paciente
usando a lanceta.




Coletar o sangue utilizando
o capilar heparinizado,
preenchendo-o
completamente.

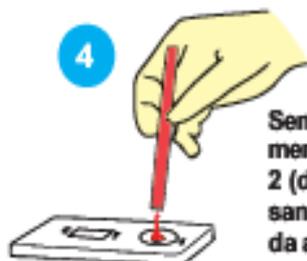

Sem encostar na
membrana, dispensar
2 (duas) gotas de
sangue na área
da amostra (50µl)

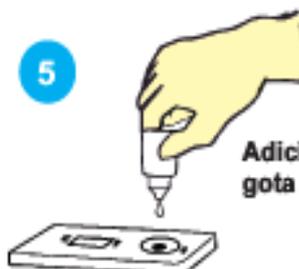


Adicionar 01 (uma)
gota do tampão.

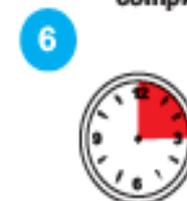

Aguardar de
10 a 15 minutos
para leitura.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

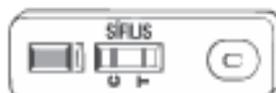

POSITIVO

Se o resultado for
POSITIVO, aparecerão
duas bandas coloridas.



NEGATIVO

Se o resultado for **NEGATIVO**,
aparecerá apenas uma banda
colorida na área 'C'.



INVÁLIDO

O resultado será **INVÁLIDO** se,
após 15 minutos, não surgir
uma banda colorida na área 'C',
havendo ou não banda na área 'T'.

ATENÇÃO
SAC.: 0800 772 9977

- Qualquer intensidade de cor da banda 'T' deve ser considerada como positivo.
- Não interpretar o teste após 15 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.



SAC da WAMA
telefone: 0800 772 9977
e-mail: sac@wamadiagnostica.com.br
www.wamadiagnostica.com.br

SAC do distribuidor PMH
telefone: (61) 3403-1300
e-mail: msaude@pmh.com.br